


MYOTRAC INFINITI

EQUIPO DE BIORRETROALIMENTACIÓN PARA LA INCONTINENCIA

Reg. San. 0986E2008 SSA

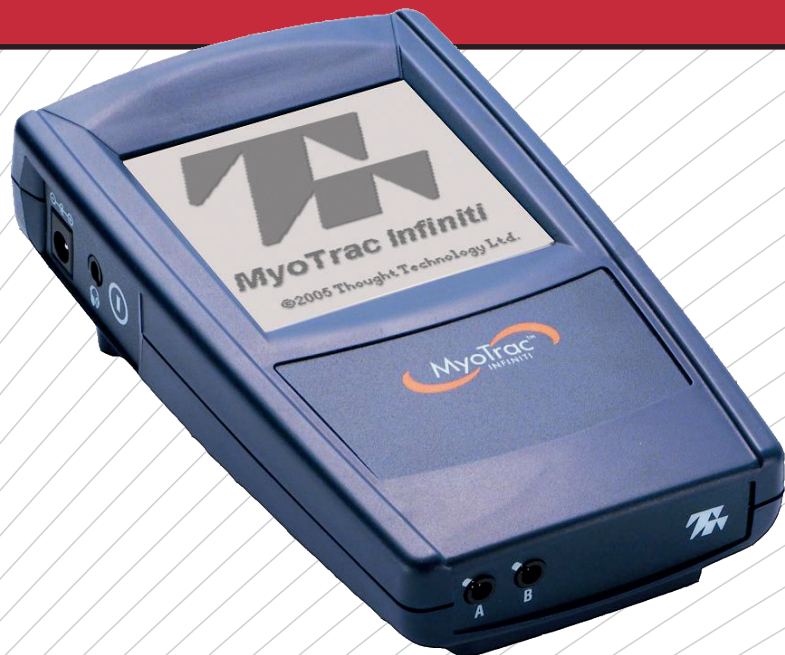

Myotrac Infiniti de uso clínico y casero integra tanto la Retroalimentación Biológica de sEMG y la estimulación eléctrica.

Beneficios clínicos

Con Myotrac, el profesional podrá evaluar el músculo, tanto en reposo, como en actividad; arrojándole valores estadísticos que podrán ser documentados los cuales le guiarán en el proceso de reeducación de piso pélvico.

Ventajas

Tratamiento de Incontinencia Urinaria fortaleciendo el piso pélvico. Provoca la inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos, obteniéndose resultados positivos.

Tratamiento de Incontinencia Fecal, mediante ejercicios de reeducación muscular y estimulación.

Tratamiento de incontinencia, mediante evaluación de EMG en los músculos del Piso Pélvico y los músculos accesorios como son los abdominales o los glúteos.

El Myotrac puede ser utilizado de forma ambulatoria o conectado a través de la computadora.

Principales usos

- Biorretroalimentación, relajación y reeducación muscular.
- Relajación de espasmos musculares.
- Incremento local de la circulación sanguínea.
- Prevención o retardo de atrofia por desuso

CARACTERÍSTICAS

- Tiene un dispositivo de dos canales para medir electromiografía de superficie (sEMG) de alta resolución y dar estimulación eléctrica NMes (Estimulación Eléctrica Neuromuscular); con una amplia variedad de configuraciones.
- Myotrac cuenta con tres modos de operación: Biofeedback, Electro-estimulación, Reeducción Activa, es decir, la señal muscular libera la estimulación eléctrica para mejorar la activación voluntaria de grupos musculares. Esta combinación de tres modalidades, mejora las posibilidades de tratamiento y elimina la necesidad de utilizar diferentes dispositivos de apoyo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Batería recargable tipo 4AAA, alcalina de 6V y adaptador de corriente de grado médico a 5V USB (vida de las baterías 3-4 horas)
- Frecuencia de muestreo de 2048 muestras por segundo.
- Intensidad de estímulo: 0-100mA
- Frecuencia de estímulo 2Hz – 100Hz / 12.5Hz – 200Hz
- Ancho de pulso 50 - 400µs
- Rampa de ascenso y descenso 0 -10 segundos
- Pantalla Touch Screen de alto contraste
- 2 tipos de sesión
- Protocolos incluidos
- Modo de uso ambulatorio y la PC.

ACCESORIOS INCLUIDOS



- Cable USB
- Kit de cables para Semg y Stim
- Pila recargable
- Cargador de batería
- Cable extensor para sEMG
- El software BioGraph en español que nos da facilidad de uso y pantallas interactivas compuestas de: videos, imágenes y sonidos.
- Maletín para protección y transporte del equipo.
- Manuales y guías en español
- Curso de capacitación.
- Accesorios opcionales
- Electrodo Vaginal Exclusivo
- Electrodo Rectal Exclusivo
- Electrodo Vaginal Stim
- Electrodo Rectal Estándar
- Electrodo sencillo o de tira
- Electrodo triodos

MYOTRAC INFINITI

EQUIPO DE BIORRETROALIMENTACIÓN PARA LA INCONTINENCIA

**Thought
Technology Ltd.**

Reg. San. 0986E2008 SSA

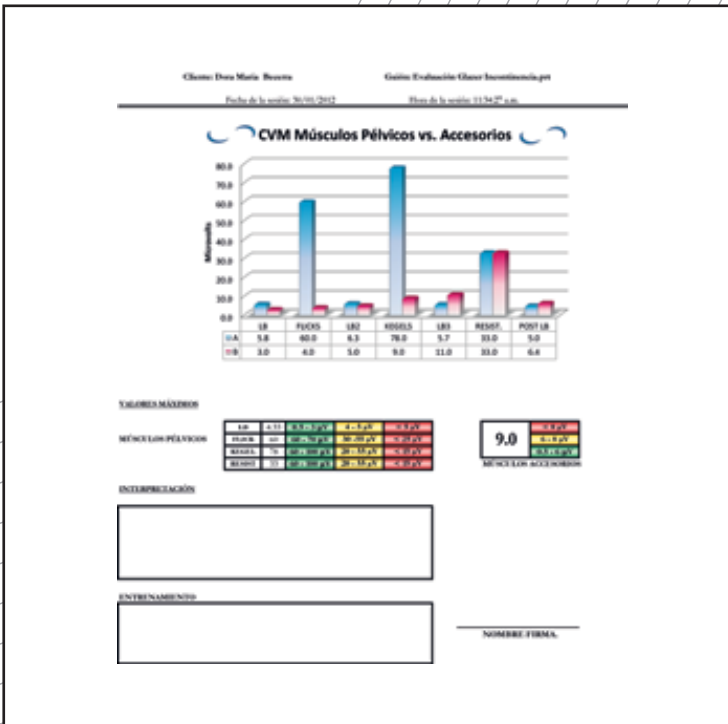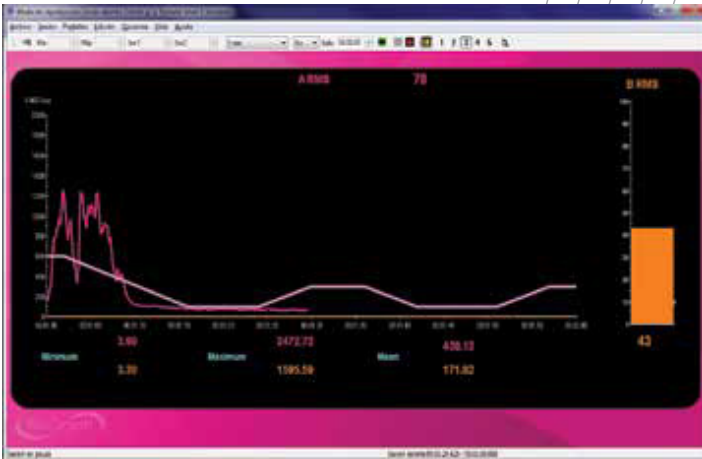

Sensor para estimulación vaginal



Sensor para estimulación rectal



COFEPRIS AP no. 153300202C2871

CALL CENTER
(777) 317 7035/36
extensiones 200 / 213 / 223 / 237



OFICINA CENTRAL
CUERNAVACA, MOR.
(777) 317 7035/36

ZONA CENTRO
CIUDAD DE MÉXICO
(55) 5689 5988/99

ZONA OCCIDENTE
GUADALAJARA, JAL.
(33) 3616 6826

ZONA SUR
MÉRIDA, YUC.
(999) 179 5734

ZONA NORTE
MONTERREY, NL.
(811) 729 0360

[f/interferenciales](https://www.facebook.com/interferenciales)

www.interferenciales.com.mx

equipos@interferenciales.com.mx